

Laser Co2 FRACCIONAL

UltraFraxel VI

Tecnología láser CO₂ para resultados
seguros y rentables



Laser Co2 Fraccional

El Láser CO₂ Fraccionado + Vaginal es una herramienta de última generación diseñada para ofrecer tratamientos estéticos y ginecológicos de alta precisión, combinando eficacia clínica, seguridad para el paciente y rentabilidad para el profesional.

Con sus modos de trabajo **fraccionado**, **ginecológico** y **continuo**, permite realizar procedimientos que estimulan la regeneración de colágeno, mejoran la textura de la piel y restauran la firmeza de los tejidos.

Nuestra máquina láser CO₂ fraccionado + vaginal combina precisión médica, calidad superior y un diseño elegante que realza cualquier consultorio o clínica. Su avanzada plataforma integra un software intuitivo y potente, que facilita el manejo y optimiza cada procedimiento para obtener resultados consistentes y seguros.

La mejor calidad de tubo láser RF, de la famosa marca “USA-Synrad”, ofreciendo seguridad y precisión.

Un brazo articulado de 7 articulaciones hecho en Corea del Sur con lentes de alta calidad y la mejor eficacia de transmisión.

Mini-motores Alemanes utilizados en el brazo, hacen que el láser dispare más rápido, uniforme y estable la energía.

La fuente de alimentación de corriente y tensión constantes de alta calidad garantiza una energía estable y continua para la máquina.

Cabezales de escaneado de diseño exclusivo, fáciles de manejar.

ACCESORIOS

IMAGEN	DESCRIPCION	CANTIDAD
	Brazo Articulado	1
	Cabezal Fraccionado	1
	Aplicador De Corte	3
	Grinder Holder, Cabezales Gynae	1,2
	Espéculos Vaginales	2
	Clip	1
	Gafas Protectoras	2
	Cable De Alimentación	1
	Pedal	1
	Cadena De Seguridad	1
	Llaves	1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Longitud de onda	10600nm
Potencia	1 ~ 60W
Tipo de láser	UltraPulso y CW
Modo de tratamiento	Modo fraccional, modo normal, modo ginecológico, modo vulva
Brazo articulado	Brazo de siete articulaciones con rotación de hasta 360°
Tamaño del gráfico de escaneado	20mm * 20mm (MAX)
Escaner gráfico	Rectángulo, Cuadrado, Triángulo, Circulo, Hexágono, Lineal
Modo de escaneado	Orden, Centro o Aleatorio
Pantalla	LCD táctil en color de 12"
Voltaje	220/110V, 50/60HZ

APLICACIONES

ESTETICA FACIAL.

Este tratamiento es ideal para reducir arrugas finas y profundas, cicatrices de acné, líneas de expresión, manchas solares y poros dilatados.

Al trabajar en las capas profundas de la piel, estimula intensamente la producción de colágeno y elastina, promoviendo una regeneración celular que devuelve al rostro una apariencia más joven, tersa y luminosa.

Gracias a su tecnología fraccional, el láser actúa únicamente sobre microzonas específicas de la piel, dejando áreas sanas entre cada punto de impacto, lo que acelera el proceso de recuperación y minimiza el tiempo de inactividad. Es una excelente opción para quienes buscan resultados visibles y duraderos sin necesidad de cirugía.

GINECOLOGIA ESTETICA.

El láser CO2 fraccional en su modalidad ginecológica está diseñado para brindar soluciones efectivas, seguras en el cuidado íntimo femenino. Este tratamiento estimula la regeneración del colágeno en la mucosa vaginal, mejorando la firmeza, elasticidad e hidratación del tejido.

Está indicado para mujeres que desean tratar síntomas relacionados con la atrofia vaginal, sequedad, flacidez, irritación, incontinencia urinaria leve y molestias durante las relaciones sexuales, especialmente en etapas como el postparto o la menopausia.

Gracias a su tecnología fraccional, el procedimiento es rápido, con mínimas molestias y sin necesidad de tiempo prolongado de recuperación. Es una opción moderna y eficaz para restaurar el bienestar íntimo, la confianza y la calidad de vida femenina.

ESTETICA CORPORAL.

El láser CO2 fraccional también ofrece excelentes beneficios en tratamientos estéticos corporales, actuando de manera efectiva sobre imperfecciones de la piel en zonas como abdomen, brazos, piernas, espalda y glúteos.

Es ideal para mejorar la apariencia de estrías, cicatrices quirúrgicas o traumáticas, flacidez leve, manchas y textura irregular de la piel. Al penetrar en las capas profundas, el láser estimula la producción natural de colágeno, promoviendo una regeneración cutánea que deja la piel más firme, uniforme y rejuvenecida.

Gracias a su tecnología fraccional, se logra un tratamiento seguro, con resultados progresivos y un tiempo de recuperación más corto en comparación con otros procedimientos más invasivos.

BENEFICIOS AL PACIENTE



**RECUPERACIÓN RÁPIDA Y
MÍNIMA MOLESTIA**



**RESULTADOS VISIBLES EN
MENOS SESIONES**



**REJUVENECIMIENTO
NATURAL**



**TRATAMIENTO PRECISO Y
SEGURO**



RESULTADOS DURADEROS



**MAYOR PRECISIÓN EN EL
TRATAMIENTO**



**VERSATILIDAD EN
APLICACIONES**



SEGURIDAD COMPROBADA

CASOS CLINICOS

La eficacia de nuestra máquina láser CO₂ fraccionado + vaginal se refleja en la experiencia real de médicos y pacientes. Cada caso clínico que presentamos a continuación demuestra cómo la combinación de tecnología avanzada, diseño ergonómico y software de alto rendimiento se traduce en procedimientos precisos, seguros y con resultados visibles desde las primeras sesiones.

CASO 1

A: antes. B: seis meses después de una sola sesión de láser CO₂ fraccionado clásico de alta fluencia, con énfasis en el tercio medio y superior del rostro (paciente tratado por el doctor Héctor Leal Silva).



CASO 2

A: antes. B: un mes después de una sesión de láser fraccionado híbrido para el tratamiento de melasma (paciente tratado por el doctor Héctor Leal Silva).




CASO 3

A: antes. B: cuatro meses después de blefaroplastia con láser de CO₂, abierta en párpados superiores y trasconjuntival en párpados inferiores (paciente tratado por el doctor Héctor Leal Silva).



Galeria

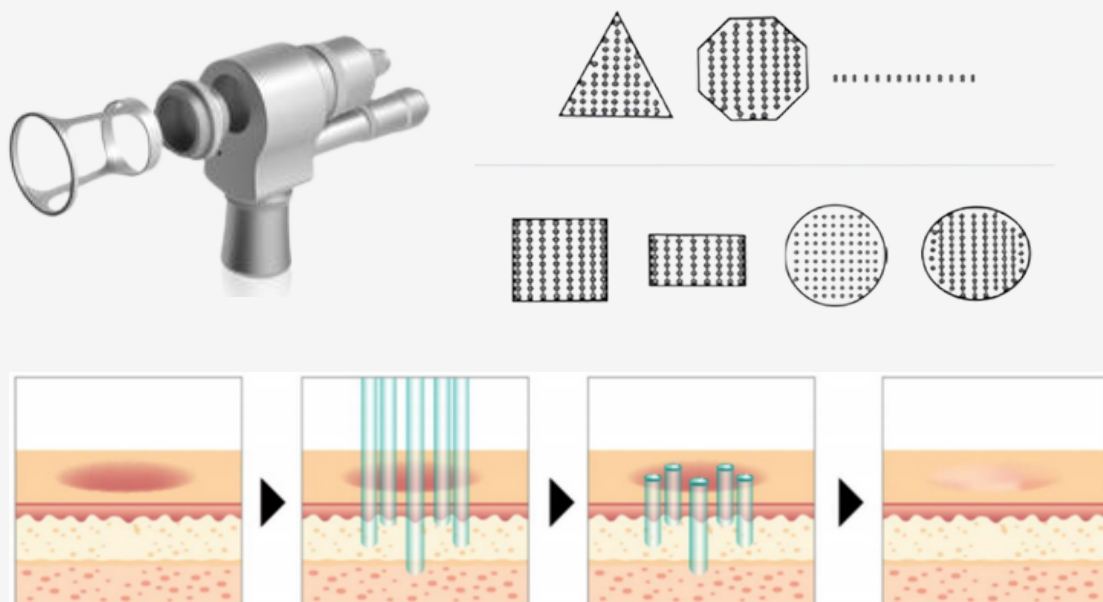

Galeria



PREVISIONES DE CRECIMIENTO

En la actualidad, el mercado de la medicina estética y la ginecología regenerativa está en constante crecimiento, impulsado por la demanda de tratamientos efectivos, seguros y con mínima recuperación. La integración de esta tecnología no solo representa un avance clínico, sino también una estrategia comercial sólida, alineada con las tendencias actuales de la medicina estética y regenerativa. En un mercado cada vez más competitivo, ofrecer tratamientos con Láser CO₂ Fraccionado es dar un paso adelante en la excelencia médica y la satisfacción del paciente.

Incorporar el Láser CO₂ Fraccionado en su consultorio significa:

- Ampliar su oferta de tratamientos con procedimientos de alta demanda.
- Incrementar la rentabilidad mediante servicios premium.
- Posicionar su práctica como un centro innovador y actualizado tecnológicamente.
- Responder a las expectativas actuales de los pacientes, que buscan resultados visibles sin tiempo prolongado de recuperación.



SOPORTE, GARANTIA Y CAPACITACION

CAPACITACION

Brindamos capacitación integral diseñada para que los especialistas dominen el uso del equipo desde el primer día. Incluye entrenamiento en protocolos clínicos, configuración óptima del láser y técnicas seguras, asegurando confianza y precisión en cada procedimiento.



GARANTIA

Respaldamos su práctica médica con una garantía integral de un año, que cubre posibles incidencias técnicas y asegura la disponibilidad de servicio especializado.

Nuestro compromiso es garantizar el óptimo funcionamiento del equipo, permitiéndole ofrecer tratamientos seguros y continuos a sus pacientes sin interrupciones en su agenda clínica.

SOPORTE

Nuestro servicio garantiza atención oportuna y soluciones efectivas, asegurando que su práctica clínica cuente siempre con respaldo profesional. No lo dejamos solo: estamos disponibles para que su equipo funcione de manera óptima en todo momento.



CONTACTO

 Cesar Fernandez Sanchez

 + 52 (442) 219-0489

 www.MedicalHS.com

 cesaromhs@gmail.com, mhstore1@yahoo.com.mx

 Querétaro, Qro. Mexico.